



Research for life.™



Catálogo de Productos - Cabina de Descarte

Cabina de Descarte

la cabina de descarte Alesco fue diseñada para ayudar y mejorar el proceso de descarte de material de desecho y basura del bioterio.

Cuenta con una estructura de acero inoxidable, que garantiza resistencia y durabilidad al equipo. La cabina posee tres canecas para el descarte de residuos, y flujo láminar para la remoción de partículas, haciendoi posible una continua remoción de polvo del encamado, pelos y otros alérgenos.

Las canecas de descarte son fabricadas en plástico resistente, lo que promueve durabilidad en la limpieza y desinfección. Posee bases móviles individuales en fabricadas en acero inoxidable , con cuatro ruedas tambien en acero inoxidable y con freno de seguridad.

Especificaciones Técnicas

- Estructura fabricada en acero inoxidable;
- Panel electrónico incluido en la estructura del equipo;
- Extracción de aire realizada con motor de bajo ruido y bajo consumo;
- Bajo nivel de ruido;
- Flujo laminar y unidireccional;
- Tres prefiltros lavables;
- Tres filtros de salida que posibilitan la retención de partículas y otros arlérgeños;
- Tres canecas de plastico resistente para descarte de material;
- Tres bases individuales en acero inoxidable con 4 ruedas, también en acero inoxidable;
- Permite descarte seguro, disminuyendo el contacto del operador con el polvo y otros alérgenos;
- Equipo ergonómico, robusto y con alta durabilidad.



Optimización de los espacios físicos y de los procesos



Piezas de reposición de rápida entrega y de fácil sustitución.



Equipo Ergonómico.



Materiale de alta calidad y durabilidad.

3

1

2



Panel de Control

Panel altamente intuitivo y con varios avisos luminosos de "equipo encendido" y también de "filtros obstruidos". La simplicidad en el panel hace que cualquier persona pueda operar el equipo.




Sistema de Filtros

Sistema compuesto por 3 filtros para retención de partículas talas como polvo del encamado, pelos y otros alérgenos. Antes de los filtros existen 3 pre-filtros lavables que aumenta la vida útil de los filtros principales.



Reservorio de Descarte

Reservorio de desechos. Pensando en la eficiencia y ergonomía del proceso de descarte, los Reservorios fueron fabricados para ser livianos, resistentes y de fácil manejo y limpieza. Las bases en acero inoxidable con ruedas proporcionan durabilidad y facilidad en el transporte.

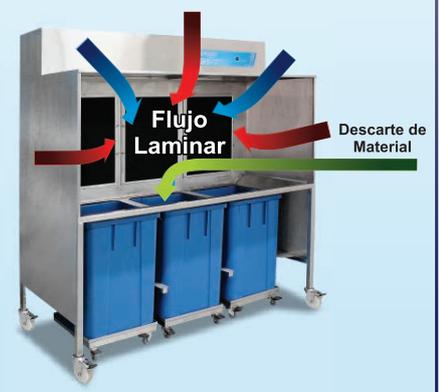

Flujo de Aire

La cabina cuenta con un flujo de aire laminar y unidireccional, generado por un motor de bajo ruido, altamente eficiente. Ese flujo garantiza el desecho de material de forma segura, sin esparcir residuos por la sala, evitando así el acúmulo de polvo y mejorando las condiciones de trabajo.

1


2

3

Kg

Voltaje

Producto	Largo	Ancho	Alto	Peso	Voltaje
Cabina de Descarte	161cm	76cm	177cm	120 Kg	220V

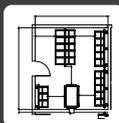

Solicite su estudio de posicionamiento GRATIS

Haga clic y vea más sobre este producto ▶



Site



Youtube

IMPORTANTE



Es altamente recomendable que cada institución haga la prueba de los procedimientos bajo condiciones reales de uso y manipulación antes de de iniciar el proceso con el equipo adquirido. El profesional que vaya a realizar los procedimientos debe estar familiarizado con todos lo items de EPI. Se recomienda el uso correcto de los Equipos de Protección Individual (EPI) para la realización de todos los procedimientos, siguiendo las recomendaciones descritas en los Procedimientos Operativos Estandarizados (POE) y las leyes o normas legales de su país. Los experimentos desarrollados en los equipos, así como cualquier contaminación causada por negligencia en el uso de otras barreras sanitarias de protección necesarias, No serán responsabilidad de ALESCO.

ATENCIÓN



El uso de detergente alcalino no está indicado para lavar los anillos de silicona de los bebederos Alesco. Los detergentes que tienen el componente “metasilicato de sodio” en su base pueden desgastar la silicona más rápidamente y dañar el material, provocando sequedad y reduciendo así su vida útil.



www.alesco.com.br



(19) 3879-2037 | 3879-2777



contato@alesco.com.br



(19) 9 8232-5657